

Kilka sposobów gry i zabawy z urządzeniem Flow-Ball KIDS®



wydmuchując piłkę w górę obracamy się wokół własnej osi nawet kilka razy;



Ustawiając dowolny pojemnik na stole próbujemy z pewnej odległości poprzez energiczne wydmuchnięcie trafić piłką do pojemnika;



Przechylamy urządzenie lekko w górę lub w dół, tak aby piłka zaczęła obracać się wokół własnej osi;




wydmuchując piłkę w górę próbujemy złapać ją ponownie do koszyka;



można również we dwoje: wydmuchując piłkę i przechylając urządzenie, próbujemy przekazać piłkę drugiej osobie, która przejmując stara się utrzymać piłkę w powietrzu dając nam czas na wdech. Po czym znowu przejmujemy piłkę. Grę można powtarzać do woli;



wydmuchując piłkę w górę utrzymujemy ją jak najdłużej w powietrzu;

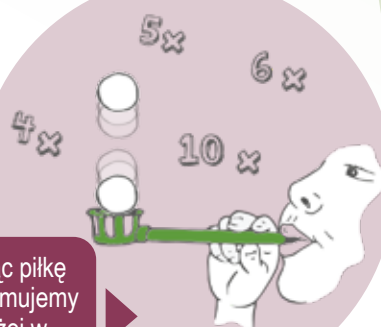

Czyszczenie i konserwacja

Ponieważ podczas używania urządzenia Flow-Ball KIDS® będzie ono miało kontakt ze śliną, zalecamy czyszczenie go po użyciu. Odłącz koszyk od trzonka i umyj wszystkie elementy wodą z mydłem, opłucz czystą wodą, dokładnie wysusz i złóż ponownie. Raz w tygodniu zalecamy czyszczenie urządzenia za pomocą atestowanych tabletek czyszczących.

The Flow-Ball KIDS® is tested in accordance with EN 71 safety directives.

Head Office:

POWERbreathe International Ltd.
Northfield Road, Southam,
Warwickshire, CV47 0FG,
England, UK.
Tel: +44 (0)1926 816100
www.powerbreathe.com

EC REP HaB GmbH,
Porschestra. 4,
D-21423 Winsen an der Luhe,
Deutschland.



Flow-Ball KIDS® nie jest zabawką. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do ćwiczeń oddechowych. Wszelkie inne użytkowanie nie jest zalecane. Materiał znajdujący się w niniejszej instrukcji ma charakter wyłącznie informacyjny. Firma POWERbreathe International Ltd nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do niniejszej instrukcji ani do opisanych w niej produktów. W związku z użytkowaniem lub skutkami użytkowania opisanego sprzętu nie formułuje się ani nie sugeruje żadnych twierdzeń. Firma POWERbreathe International Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, bezpośrednie lub przypadkowe, wynikowe lub specjalne, wynikające z wykorzystania tego materiału lub produktów opisanych w niniejszym dokumencie.

Flow-Ball KIDS® to produkt o wzorze chronionym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ze względu na program stałego doskonalenia producenta specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Logo POWERbreathe jest zarejestrowanym znakiem towarowym POWERbreathe Holdings Ltd. Wszystkie nazwy produktów POWERbreathe są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi POWERbreathe Holdings Ltd.